



TRIOMED CGI-3

Manuale d'uso

2016

Distributore esclusivo per l'Italia:



NES MEDICA srl

Via G. Marconi 30 – 21018 Sesto Calende (VA)

tel. +39 0331 932288 – fax +39 0331 932507

email: info@nesmedica.it – skype: nes_medica

Dichiarazione di conformità

Produttore: TRIOMED EU Ltd

Indirizzo: 4, Mäealuse str., EE-12618 Tallinn, Estonia

Telephone: + 372 56888978 – ID-code: 12146269



Triomed Eu Ltd dichiara di essere la sola responsabile per il seguente prodotto: Energy and Information device Triomed CGI-3 con emettitori integrati, opzione 40-43 GHz.

Triomed Eu Ltd dichiara che l'apparecchiatura è conforme alle direttive CE 2004/108, compatibilità elettromagnetica (EMC) e 2001/95, sicurezza generale del prodotto, comprese le eventuali integrazioni e modifiche.

Sono stati applicati i seguenti standard:

EN 55011:2009+A1:2010 "Apparecchiature industriali, scientifiche e mediche. Caratteristiche dei disturbi di radiofrequenza. Limiti e metodi di misura." EN61000-6-3:2007+EN61000-6-3:2007/A1:2011+EN61000-6-3:2007/AC:2012 "Compatibilità elettromagnetica (ECM), Parte 6-3 Norme generiche, emissione per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera." EN60065:2014 "Audio, video e apparecchi elettronici similari, requisiti di sicurezza."

Sulla base della direttiva 2004/108 l'apparecchiatura e la confezione recano il marchio CE.

Sergey Pichchev, Direttore operativo Triomed EU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergey Pichchev', is written over a thin horizontal line.



Gentile cliente,

Questo manuale spiega l'utilizzo dell'apparecchiatura Triomed CGI-3. Il dispositivo è fornito pronto all'uso e può essere utilizzato solo per lo scopo previsto, nel rigoroso rispetto delle istruzioni qui fornite e delle misure di sicurezza.

Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo e di seguire tutte le istruzioni. Sarete in grado di ottenere i migliori risultati e di aumentare la longevità del vostro Triomed.

In caso di uso improprio del dispositivo, decade ogni diritto di reclamo e gli eventuali rischi sono a esclusivo carico dell'utilizzatore.

Questo manuale è parte integrante del dispositivo. Per avere le informazioni a portata di mano, conservatelo insieme al dispositivo.

Se avete domande riguardanti l'uso del dispositivo, contattate il rivenditore.

Dopo la sua fabbricazione, il dispositivo viene esaminato con attenzione per garantire il suo corretto funzionamento e viene pulito e disinfettato con disinfettante Aerodesin® 2000.


Triomed CGI-3 non è un'apparecchiatura medica.

10.1. Descrizione del processo di utilizzo

- Assumete una posizione comoda.
- Selezionate il programma adatto.
- Accendete il dispositivo premendo il pulsante di controllo.
- Quando utilizzate il Programma 1 sul corpo, il dispositivo deve avere il pannello superiore rivolto verso l'alto.
- Per accendere il dispositivo e per iniziare la sessione, premete il pulsante di controllo. Mantenendolo premuto, il dispositivo passa ai successivi programmi (visibile dalle luci di programma) in circa 2 secondi. Quando il pulsante di controllo viene rilasciato, inizia a funzionare il programma prescelto e il diffusore produce a intervalli un debole suono.
- La durata di ciascuna sessione di trattamento è determinata dal programma prescelto. Si raccomanda di non interrompere la sessione. Alla fine della sessione di trattamento il dispositivo si spegne automaticamente.

Nei giorni seguenti continuate la stimolazione con la stessa sequenza. Il corpo può rispondere nello stesso posto o altrove e saprà individuare la zona di risposta in base alle sue esigenze. La zona di dolore può essere la stessa o una nuova. Eseguite il trattamento dove è necessario. La durata della stimolazione di ciascuna zona è di 10 minuti.

Programma 3. Cura, 15 minuti.

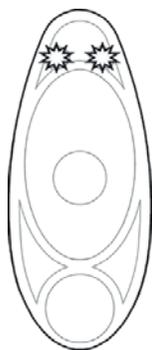

Con il programma "Guarigione" è necessario portare la piccola finestra del dispositivo sull'area di interesse e avviare il programma solo dopo. Il dispositivo può essere lasciato nella zona prescelta per un po' tempo anche dopo la fine del programma.

Il segnale informativo del cristallo Si-Ge aiuta l'EIS a riconoscere il problema automaticamente e avvia la corrispondente reazione del corpo volta a risolverlo. L'impatto sulla zona problematica porta a una rapida ripresa e al normale funzionamento dell'area.


Potete utilizzare il programma anche in caso abrasioni, ustioni sanguinamenti, in quanto accelera la rigenerazione dei tessuti danneggiati.

I seguenti simboli sono stati utilizzati nel manuale per etichettare il dispositivo.

	Marchio CE		Consultare le istruzioni d'uso.
	Non emette radiazioni ionizzanti.		Fragile.
	Numero seriale del dispositivo.		Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento.
	Non eliminare nell'indifferenziato.		On/off
	Informazioni importanti sul dispositivo e sul suo funzionamento.		Punto di contatto con il corpo.
	Mantenere il dispositivo asciutto.		

SOMMARIO

1	Scopo	Pag. 7
2	Meccanismi di funzionamento	Pag. 8
3	Caratteristiche tecniche e operative	Pag. 11
3.1	Caratteristiche tecniche generali	Pag. 11
3.2	Struttura e funzionamento	Pag. 13
3.3	Utilizzo dell'apparecchiatura	Pag. 15
4	Contenuti della confezione	Pag. 16
5	Etichetta	Pag. 16
6	Packaging	Pag. 17
7	Smaltimento	Pag. 17
8	Garanzia	Pag. 17
9	Preparazione dell'apparecchiatura per l'uso	Pag. 18
9.1	Restrizioni operative	Pag. 18
9.2	Misure di sicurezza	Pag. 19
9.3	Preparazione dell'apparecchiatura	Pag. 19
9.4	Possibili guasti e rimedi suggeriti	Pag. 20
9.5	Assistenza tecnica	Pag. 21
10	Procedure per l'utilizzo	Pag. 22
	Programma 1: armonizzazione	Pag. 23
	Programma 2: regolazione	Pag. 24
	Programma 3: sostegno alla guarigione	Pag. 27
10.1	Come usare l'apparecchiatura	Pag. 28

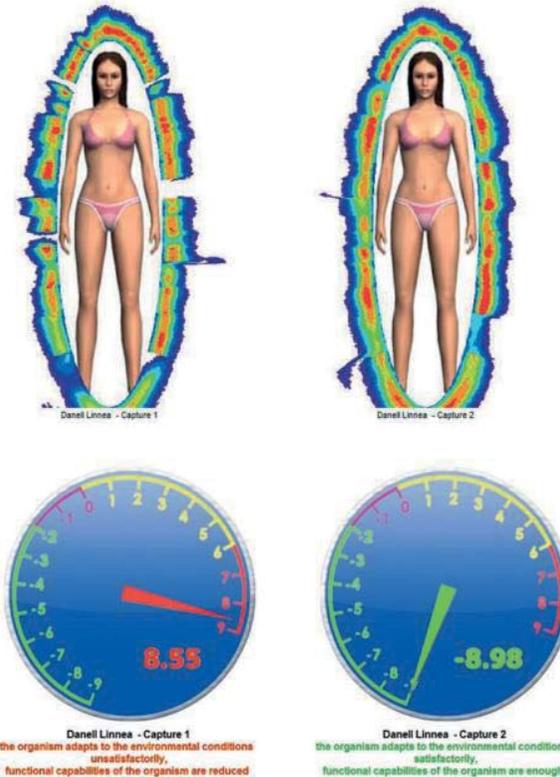

Donna sofferente di sindrome da fatica cronica.

La prima foto mostra una mancanza di energia nella zona del rene sinistro e dei polmoni, nonché ridotto adattamento. La valutazione diagnostica del palmo ha identificato le aree problematiche. La stimolazione delle zone con Triomed CGI-3 è stata condotta per 10 minuti per ciascuna. La foto scattata dopo il trattamento mostra un aumento di energia nelle aree e il ripristino dell'adattamento.

Allo stesso tempo, grazie alla regolazione dei flussi di energia e dei nodi, viene recuperato l'EIS umano, aumenta la resistenza generale dell'organismo ai fattori sfavorevoli, sono ripristinate le riserve funzionali.

Il programma individua le aree che lavorano con distorsioni e le corregge, armonizzando l'interazione delle cellule.

La valutazione diagnostica dovrebbe essere eseguita in un'atmosfera calma, tranquilla e rilassata. Prestate attenzione alla risposta del corpo.

1. Assumete una posizione comoda, rilassatevi e iniziate stimolando con il dispositivo il palmo della mano sinistra (destra per i mancini) con movimenti lenti e circolari per 5 minuti (2 cerchi/minuto).
2. Prestate attenzione al vostro corpo. A poco a poco, non subito, si può sentire la sua risposta. Può essere sotto forma di formicolio, prurito o lievi sensazioni dolorose in luoghi diversi. Individuate la risposta più pronunciata. Questa sarà la posizione della maggior reazione del corpo all'impatto (zona trigger). Accendete nuovamente il dispositivo, appoggiatelo su quel punto e avviate la sessione di guarigione (3). Trattate una sola zona per ogni sessione.

INTRODUZIONE

*“Qualsiasi trattamento non basato sul concetto di energia è inutile.”
Albert Szent-Györgyi, dottore in scienze mediche*

Vincitore del premio Nobel nel 1937 - Ungheria

La salute di una persona dipende molto dalla sua capacità di adattarsi all'ambiente. Persone e l'ambiente interagiscono costantemente tra loro attraverso lo scambio di energia, informazioni e materia. L'equilibrio di questo processo di scambio determina in larga misura le nostre condizioni di salute. Per fornire questo scambio di energia e informazioni, il corpo umano ha sviluppato il sistema energetico e informativo (EIS). È noto non come un metodo di guarigione, ma come un modo molto efficace per mantenere e migliorare la salute.

Un modo moderno ed efficace per vivere in armonia con l'ambiente è rafforzare il proprio sistema di scambio di energia e informazioni. Un corpo naturalmente e armoniosamente equilibrato gode di grande vitalità, di capacità di adattamento e di sopravvivenza in un mondo in rapida evoluzione.

Triomed CGI-3 vi aiuterà a mantenere questo equilibrio vitale.

1. SCOPO


Il dispositivo Triomed CGI-3 è stato progettato per proteggere la vostra salute, influenzando il sistema energetico e informativo (EIS) e l'ambiente che vi circonda con un segnale ondulatorio appositamente selezionato emesso dal cristallo Si-Ge.



Triomed CGI-3 è un'apparecchiatura multifunzionale usata per:

- Armonizzare l'EIS umano.
- Mantenere l'equilibrio energetico del corpo.
- Ripristinare la normale funzionalità cellulare.
- Eliminare le conseguenze dello stress.
- Prevenire lo stress.
- Antiaging.

Triomed CGI-3 darà benefici a tutti i membri della famiglia, indipendentemente dall'età e dal sesso. È comodo e facile da usare, economico, sicuro, piccolo e leggero. Si raccomanda l'uso quotidiano per aumentare la vitalità e migliorare le condizioni psico-fisiche. Il dispositivo è classificato come prodotto di uso ciclico multiplo. Senza effetti collaterali.

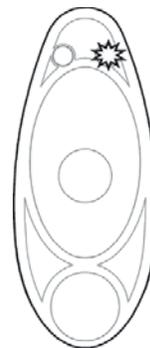

Programma 2. Regolazione, 10 minuti.


Questo programma funziona con i principali centri di energia, i canali e le aree problematiche.

Il programma è indicato per affaticamento, irritabilità, sforzi eccessivi, stress psico-emozionale, disturbi del sonno e dell'umore, depressione. Promuove una reazione adeguata dell'organismo a qualsiasi stimolo. Ottimizza tutte le fasi della reazione ai fattori che causano stress. Per attivare gli effetti antistress si raccomanda di utilizzare il dispositivo per stimolare la proiezione dei chakra applicandolo sul polso e nel

centro del palmo della mano sinistra (per i mancini la destra) e sul lobo dell'orecchio, con lento movimento circolare.

La durata della stimolazione per ciascuna zona è di 12 minuti, due volte al giorno. In caso di stress cronico proseguire per 10 - 15 giorni.

Il programma stimola i centri di energia per ottenere l'equilibrio energetico del corpo. Per ripristinare il flusso di energia attraverso i canali delle mani e dei piedi, utilizzate il dispositivo sulle dita delle mani e dei piedi (1 minuto ciascuno), iniziando con il mignolo sinistro e finendo con il mignolo destro.

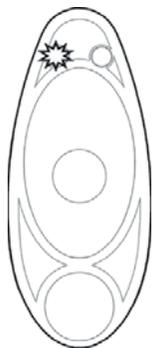

Programma 1. Armonizzazione, 30 minuti (direttamente sul corpo o per stimolazione a distanza)

La durata massima della stimolazione nell'arco delle 24 ore è di 2 ore.

Il programma 1 stimola l'intero EIS della persona. A tal fine, il dispositivo può essere messo al collo con un nastro o posto a una distanza massima di 50 cm dal corpo. La radiazione delle particelle emesse dai cristalli Si-Ge e presenti nell'aria sono attive anche dopo che il dispositivo è stato spento. Lo spazio circostante è pulito da smog elettromagnetico ed è per questa ragione che la radiazione MM è di così vitale importanza per tutti gli oggetti biologici (persone, animali, piante).

L'interazione tra la radiazione dei cristalli Si-Ge e tutti i nodi e flussi di energia nell'EIS di tutte le persone presenti in quello spazio sono armonizzate. Il vantaggio derivante dalle condizioni armonizzate migliora la resistenza generale del corpo verso fattori sfavorevoli, rafforzando le sue proprietà di recupero. Le persone diventano più tolleranti verso gli altri. Il risultato è un'oasi di esistenza armoniosa.

2. Meccanismi di funzionamento

Secondo gli insegnamenti orientali, siamo tutti una sola unità consistente di due parti inseparabili: il corpo fisico e il sistema energetico e informativo (EIS). Ogni processo che avviene nel corpo, in un organo o in una cellula, ha un duplice scopo: la variazione di energia porterà a cambiamenti nel processo biochimico e ogni reazione biochimica porterà a un cambiamento nel sistema energetico.

I sistemi energetico e informativo di un essere umano sono costituiti dal sistema centrale energetico-informativo dei canali, dal sistema periferico dei canali, dal sistema dei centri di energia e dei punti di distribuzione dell'energia (meridiani MTC).

Il corpo umano funziona armonicamente se i suoi canali energetici sono puliti e quindi il flusso di energia è ottimo.

I cambiamenti nel metabolismo biochimico si verificano a causa di onde modificate di energia, che fluiscono con difficoltà attraverso i centri di energia. Le onde di energia mutate disturbano le normali funzioni dei centri e quindi impediscono il flusso di energia sana verso i canali periferici e gli organi interni. Ciò si traduce in una mancanza di energia per attivare i processi necessari nel corpo e la loro propria funzione.

L'interruzione della normale funzione EIS può essere causata anche da fattori esterni: situazioni ambientali avverse, inquinamento, smog elettromagnetico, acqua di scarsa qualità, cibo malsano, stress, tensione emotiva e psicologica, ecc.

Il trattamento con le onde elettromagnetiche di una o dell'altra parte del corpo migliorerà l'intero sistema EIS (energia e informazione).

La ricerca ha rivelato che la stimolazione con il dispositivo produce segnali elettromagnetici simili a quelli del sistema EIS umano sano.

Il cristallo SI-GE utilizzato nel dispositivo Triomed CGI-3 può funzionare in due modalità: modalità attiva (quando il cristallo è attivato e il dispositivo viene applicato sul corpo) o in modalità background quando non vi è alcun contatto diretto con il corpo. Quando si lavora in modalità attiva, il cristallo utilizza la tecnologia BioTrEM per entrare in sintonia con i parametri di frequenza dell'EIS. Dopo che il dispositivo è stato spento, il cristallo continua a trasmettere le stesse onde di frequenza, ma in modalità background.

La ricerca sull'energia umana con l'aiuto del dispositivo GDV (Gas Discharge Visualization) ha dimostrato che la radiazione del cristallo Si-Ge utilizzato nel Triomed CGI-3 influenza positivamente l'EIS umano.

10. Procedure per l'uso

Questo manuale regola l'utilizzo del dispositivo. L'esposizione dell'energia biologica umana alla radiazione di bassa intensità del cristallo Si-Ge mantiene e rafforza il sistema energetico e informativo della persona, ripristina l'integrità del flusso energetico, favorisce il ripristino di un armonioso funzionamento cellulare e, di conseguenza, il ringiovanimento generale del corpo.

I programmi lanciano onde di radiazioni EM di bassa intensità generate dal cristallo Si-Ge, con diversa distribuzione della modulazione a bassa frequenza e capacità integrante. La combinazione dei programmi garantisce la multifunzionalità e aumenta l'effetto dei trattamenti. Selezionate il programma in base al trattamento preferito.

Il dispositivo può essere usato per stimolare:

- il sistema energetico-informativo dei canali;
- il Sistema periferico dei canali;
- il Sistema dei centri energetici;
- le aree problematiche.

Gli effetti del trattamento sono a lungo termine. All'inizio, subito dopo un trattamento, l'effetto positivo è evidente. Migliorerà durante le successive 2-3 settimane. Non lasciate un intervallo superiore alla tre settimane tra i cicli di trattamento.


3	Non è possibile uscire dalla modalità selezionata. Non si spegne.	Circuito elettrico difettoso.	Mandate l'apparecchiatura a riparare.
4	Non si può selezionare Mute.	Circuito elettrico difettoso.	Mandate l'apparecchiatura a riparare.
5	La batteria si scarica rapidamente, anche se il dispositivo viene usato raramente (meno di una volta al mese).	Circuito elettrico difettoso.	Mandate l'apparecchiatura a riparare.

In caso di altri difetti, contattate il Vostro rivenditore.

9.5 Manutenzione

Non è richiesta manutenzione durante il ciclo di vita del prodotto. Il controllo delle caratteristiche della radiazione generata può essere fatto una volta l'anno. Chiedete al rivenditore.

La tecnologia BioTrEM permette di utilizzare l'effetto dell'omeopatia elettronica e regolare le distorsioni nel funzionamento del sistema energetico e informativo (EIS), che ritorna al suo stato armonico, e ripristinare il normale funzionamento delle cellule così rinvigorate. L'effetto ringiovanimento è raggiunto anche grazie all'aumentata sensibilità dei recettori delle membrane cellulari.

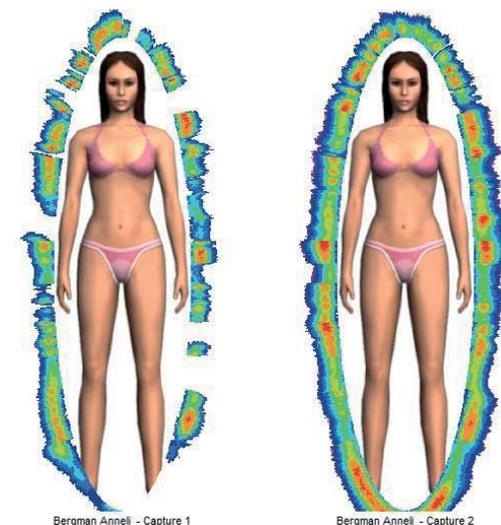

È noto che la gente inizia a invecchiare quando i recettori di membrana diventano meno sensibili ai segnali inviati dall'ipotalamo, il principale centro regolatore del corpo. La ricerca in campo energetico umano per mezzo di GDV è stata realizzata da Manniskans Resurser AB, Stoccolma, Svezia. L'antica medicina orientale afferma che ci sono molte malattie, ma solo un motivo: è stata distrutta l'armonia.

3. Caratteristiche tecniche e operative

3.1 Caratteristiche tecniche generali

Il dispositivo è prodotto senza l'uso di sostanze chimiche nocive in conformità ai documenti tecnici Triomed LLC. Per quanto riguarda i rischi potenziali d'uso, il dispositivo è stato progettato con alimentazione a sicurezza interna.

Il dispositivo Triomed CGI-3 ha un generatore interno che produce onde elettromagnetiche nella banda millimetrica (lunghezza d'onda tra 7,5 e 6,98 mm). Il software permette di generare durante la sessione MM EMR con modulazione variata. Il dispositivo ha tre programmi di modulazione di frequenza MM. Le principali caratteristiche tecniche del dispositivo Triomed CGI-3 sono riportati nella tabella 1 che segue.

Tavola 1		
Nr	Caratteristiche	Descrizione
1.	Tempo di avvio	Meno di 5 sec.
2.	Lavoro con caratteristiche specifiche	Continuo, ininterrotto

Il livello della batteria è indicato dalla luminosità.

Il buon funzionamento del dispositivo (descritto nel capitolo 3.2) deve essere controllato prima di ogni utilizzo.

9.4. Possibili difetti e rimedi suggeriti

Tavola 2			
No	Difetto	Possibile motivo	Rimedio
1	I led non si accendono quando viene premuto il tasto di controllo.	La batteria è difettosa o scarica.	Sostituire la batteria. Se anche con una batteria nuova non funziona, mandatelo a riparare.
2	Mancanza di suono dopo l'attivazione del programma.	Circuito elettrico difettoso.	Mandate l'apparecchiatura a riparare.

9.2. Misure di sicurezza




Non sono richieste particolari misure di sicurezza.

9.3. Preparare il dispositivo per l'uso

Prima di accendere il dispositivo ispezionate l'esterno e assicuratevi che il corpo non sia danneggiato. È vietato utilizzare il dispositivo con il corpo danneggiato!

La figura. 7 mostra come inserire o sostituire la batteria.

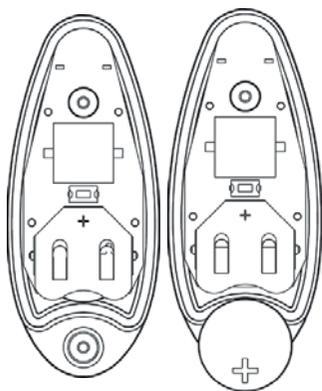

Utilizzate un cacciavite a croce per svitare le viti.

Togliete il pannello superiore.

Inserite una batteria CR2032 nel supporto della batteria osservando la polarità (in caso di sostituzione, rimuovere prima la vecchia batteria).

Riposizionate il pannello superiore e fissatelo al pannello inferiore con le viti.

Nr	Caratteristiche	Descrizione
3.	Arresto automatico	Alla fine del programma
4.	Dimensioni	75×45×13 mm
5.	Peso	0.1 kg
6.	Tempo medio tra i possibili guasti	Non meno di 1.500 ore
7.	Ciclo di vita	Minimo 8 anni
8.	Materiale esterno (corpo)	Plastica policarbonata
9.	Temperatura ambiente durante l'uso	Tra + 10 e + 35 C°
10.	Umidità nominale dell'aria (combinazione di umidità relativa e temperatura)	80 % a 25 C°
11.	Tensione diretta	3.0 V
12.	Consumo di corrente	Non superiore a 30 mA
13.	Consumo di energia	Non superiore a 100 mVA


Il dispositivo è fornito con una batteria CR2032.

Le superfici esterne del dispositivo vengono disinfettate con una soluzione al 3% di perossido di idrogeno o una soluzione acquosa all'1% di clorexidina. Immergere un panno nella soluzione disinfettante, strizzarlo e pulire il dispositivo. Non sono necessarie particolari misure di sicurezza.

Struttura e funzionamento

Il dispositivo è un'unità monoblocco. Sul pannello frontale (Fig. 1) trovate il pulsante di controllo e due indicatori led. Il pannello posteriore (Fig. 2) ha due viti di fissaggio e la superficie di lavoro con sotto il generatore millimetrico EMR. L'aspetto del dispositivo e gli elementi della struttura sono mostrati nelle figure 1 e 2.

Ci sono il generatore MM EMR, gli indicatori led, un pulsante di controllo, le viti di fissaggio, la postazione per il fissaggio della cinghia.

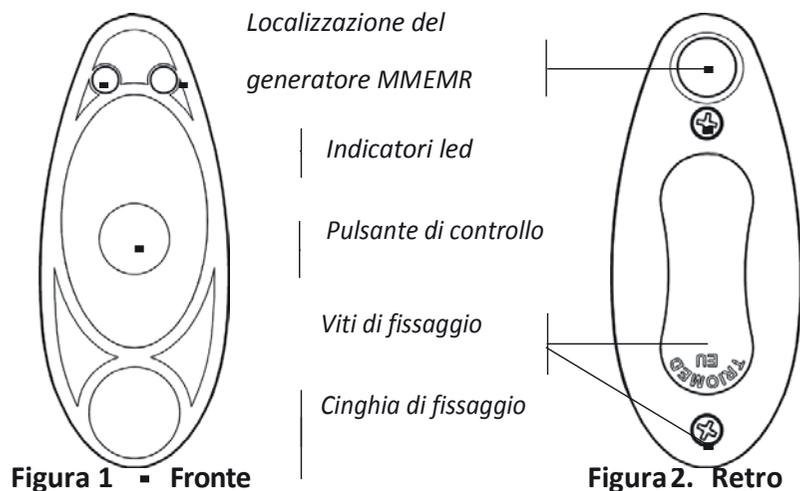

9. Preparazione per l'uso

9.1. Restrizioni operative



L'apparecchiatura può essere utilizzata solo dopo aver letto il manuale d'uso e seguendo le istruzioni.

È PROIBITO



- Utilizzarla senza aver letto il manuale.
- Utilizzarla se difettosa o danneggiata.
- Utilizzarla in ambienti con alto grado di umidità.



- Immergerla in acqua.
- Far penetrare al suo interno acqua o sostanze chimiche.



- Gestirla in modo impreciso, esporla a eccessive vibrazioni meccaniche o urti, schiacciarla o farla cadere.
- Utilizzare alimentazione non raccomandata dal costruttore.



- Lasciarla in luoghi accessibili a bambini o animali.
- Utilizzarla dopo che è stata conservata a temperature inferiori a 0° senza lasciarla almeno 4 ore senza confezione e a temperatura ambiente.

- Il consumo di energia
- I simboli operativi
- Il marchio CE

Le altre informazioni importanti sono contenute nel manuale d'uso.

6. Confezione

La confezione protegge il dispositivo da danni atmosferici e meccanici e fornisce tutte le informazioni su prodotto, produttore e rappresentante autorizzato nell'UE.

7. Smaltimento



Il dispositivo è prodotto in conformità con i requisiti CE. Deve essere smaltito secondo le regole per le apparecchiature elettroniche.

8. Garanzia

La garanzia è contenuta nella confezione.

Il dispositivo si accende premendo il pulsante di controllo. Il tasto va mantenuto premuto: i programmi sono selezionati progressivamente, con l'accensione del led di sinistra (P-1), dopo 2 secondi si accende il led di destra (P-2), infine tutti e due (P-3). (Figure 3- 5). Se il pulsante di controllo non viene rilasciato, il ciclo di commutazione del programma viene ripetuto. Il rilascio del tasto durante l'indicazione di un particolare programma attiva quel programma. Per confermare che il dispositivo sta funzionando in conformità con il programma selezionato, i led corrispondenti sul pannello frontale sono accesi (Fig. 3 - 5) e viene prodotto un leggero segnale sonoro a intervalli di 3-4 sec. Per utilizzare il dispositivo in modalità "mute", tenete premuto il pulsante di controllo dopo il completamento del primo ciclo di selezione. Attendere il programma selezionato in precedenza e rilasciare il pulsante di controllo. Il dispositivo è programmato con il suono.

Finito il programma selezionato, il dispositivo si spegne automaticamente. Può essere spento in qualsiasi momento premendo il pulsante di controllo.

3.1. Uso del dispositivo

Scegliete il programma (si veda la sezione 10.1). Accendete il dispositivo premendo il pulsante di controllo e tenetelo premuto finché la combinazione dei led è quella desiderata (Fig 3-5), quindi rilasciatelo. L'apparecchiatura inizia a lavorare secondo il programma scelto e si spegne automaticamente alla fine.

Figura 3. Programma 1

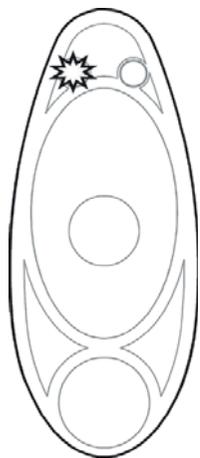


Figura 4. Programma 2


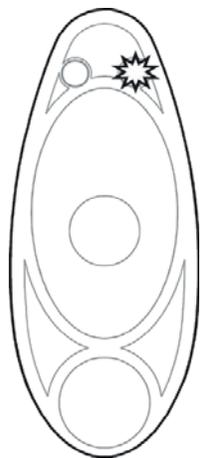


Figura 5. Programma 3

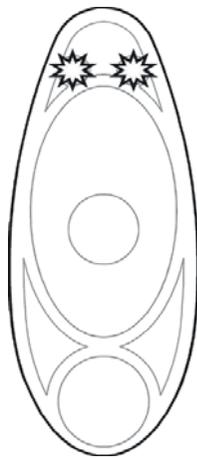

4. Contenuto della confezione

- Apparecchiatura Triomed CGI-3
- Batteria CR2032
- Manuale d'uso
- Imballaggio
- Garanzia

5. Etichetta

L'etichetta è sul retro dell'apparecchiatura e indica:



Figura 5. Etichetta

- Il nome dell'apparecchiatura
- Il numero di serie
- Il marchio CE

L'imballo specifica

- Il produttore
- Il tipo di batteria